


CLARUS-N

AI for Unlocking Neuroimages

분석된 영상을 확인하는 방법
3D slicer

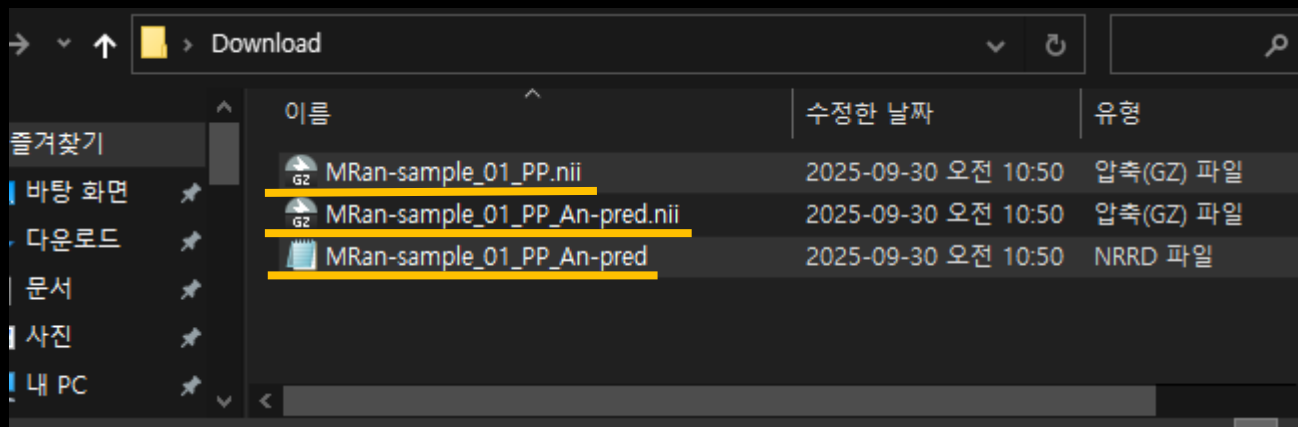

결과 파일의 약어는 다음과 같습니다.

****_PP.nii** : 전송된 파일의 NifTI 변환된 원본파일

*******_**-pred.nii** : 전송된 파일의 분석결과 NifTI 파일

*******_**-pred.nrrd** : 전송된 파일의 분석결과 NRRD 파일

[An]: Aneurysm, [St]: Stenosis, [Vs]: Vessel

[carotid_Vs]: Carotid Sessel, [carotid_St]: Carotid Stenosis

[T]: onset Time, [M]: Multiple class, [S]: Single class

[pred] : 예측된 분석결과 파일을 의미(prediction)

Google

+ 3D slicer download

Google 검색

I'm Feeling Lucky

Google 검색창에
[3D slicer download] 입력

3D Slicer

Application ▾ Support ▾ Solutions ▾ Developers ▾ About ▾

Download 3D Slicer

You are one click away from downloading 3D Slicer, a free and open-source platform for analyzing and understanding medical image data. Created through multiple grants from the US National Institutes of Health (NIH) over almost two decades, Slicer brings powerful medical image processing, visualization, and data analysis tools within reach of everyone.

Slicer is built and tested on many hardware and software platforms. 3D Slicer runs on modern Windows, macOS, and a variety of Linux distributions. Read about [system requirements](#).



Windows



macOS



Linux
prerequisites

Stable Release <i>access older releases</i>	5.10.0 revision 34045 built 2026-02-13  browse extensions	5.10.0 revision 34045 built 2026-03-19  browse extensions	5.10.0 revision 34045 built 2025-11-10  browse extensions
Preview Release	5.11.0 revision 34499 built 2026-04-12  browse extensions	5.11.0 revision 34499 built 2026-04-12  browse extensions	5.11.0 revision 34499 built 2026-04-12  browse extensions

Checksums Package Naming Convention Access Older Releases

Slicer packages are named based on the following naming convention:


컴퓨터 사양에 따라 다운로드 및 설치


분석된 영상을 확인하는 방법
3D slicer

MRA Vessel 3D AI
Aneurysm AI
Stenosis AI

Carotid Vessel 3D AI
Carotid Stenosis AI

CTA Vessel 3D AI

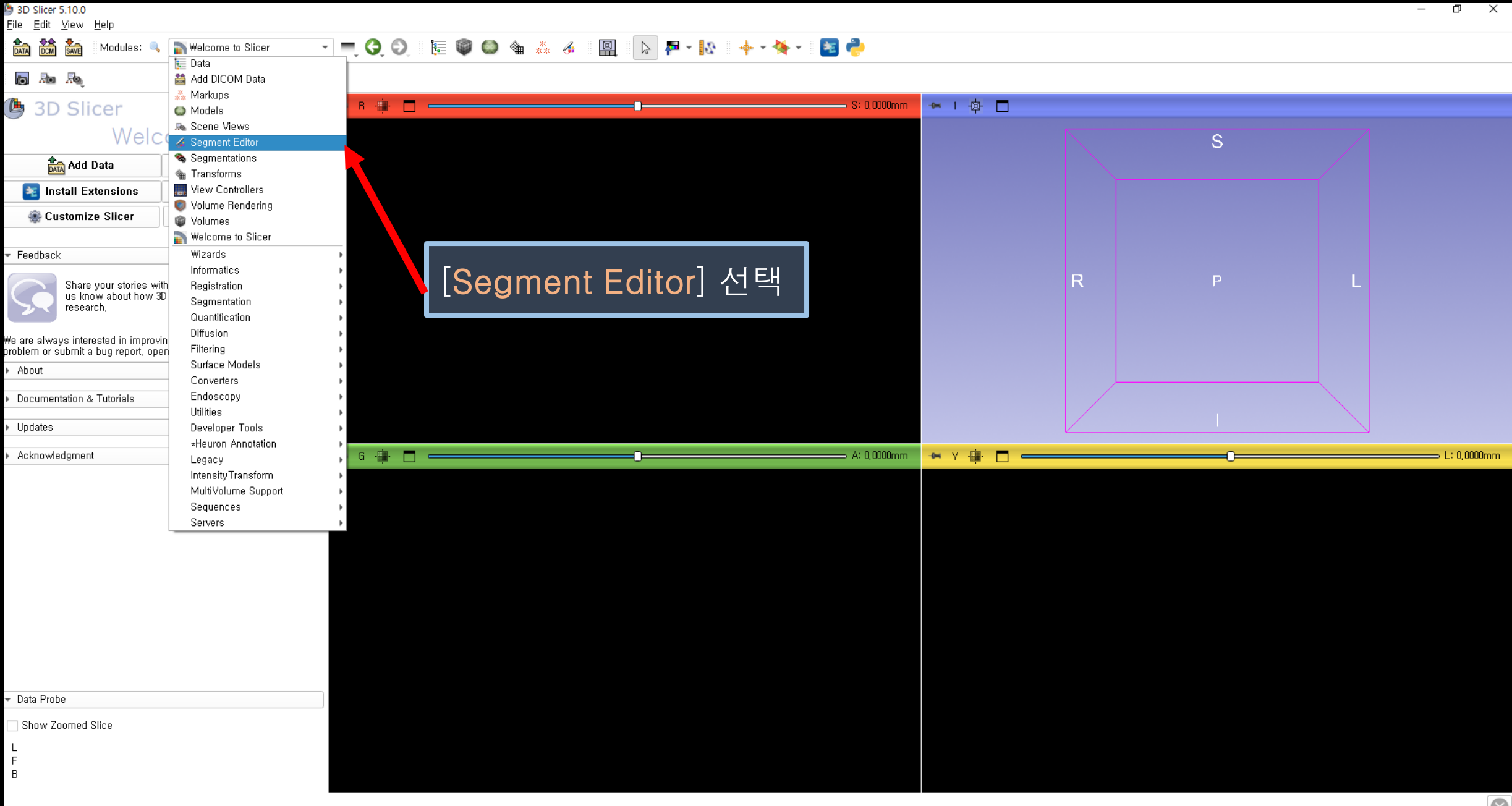

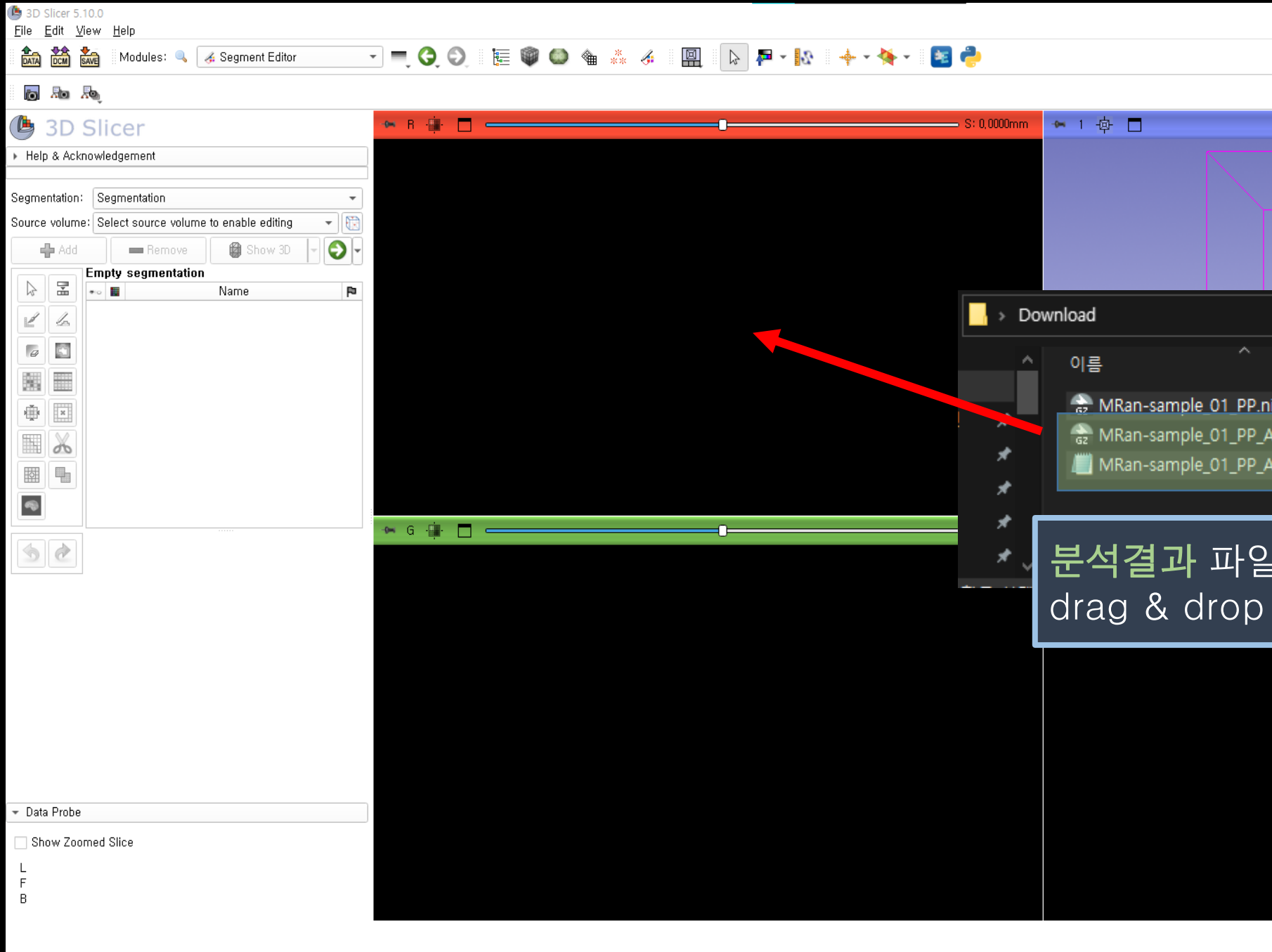

분석결과 파일 중 1개를 3D slicer 화면에 drag & drop 합니다.

3D Slicer 5.10.0

File Edit View Help



3D Slicer


Help & Acknowledgement

Segmentation: Segmentation

Source volume: Select source volume to enable editing



Empty segmentation


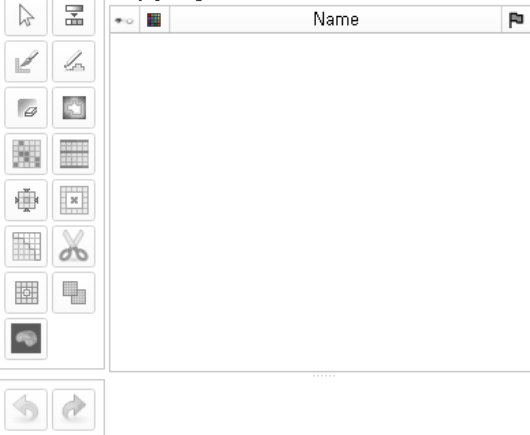



Data Probe


Show Zoomed Slice


L
F
B

[****_**-pred.nrrd] → [Segmentation]으로 설정

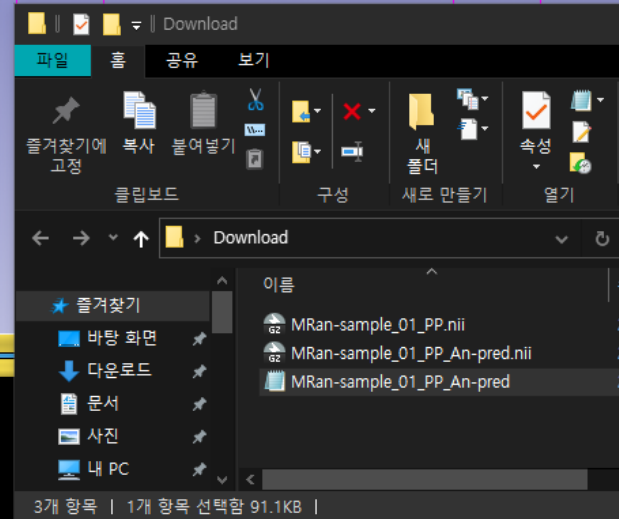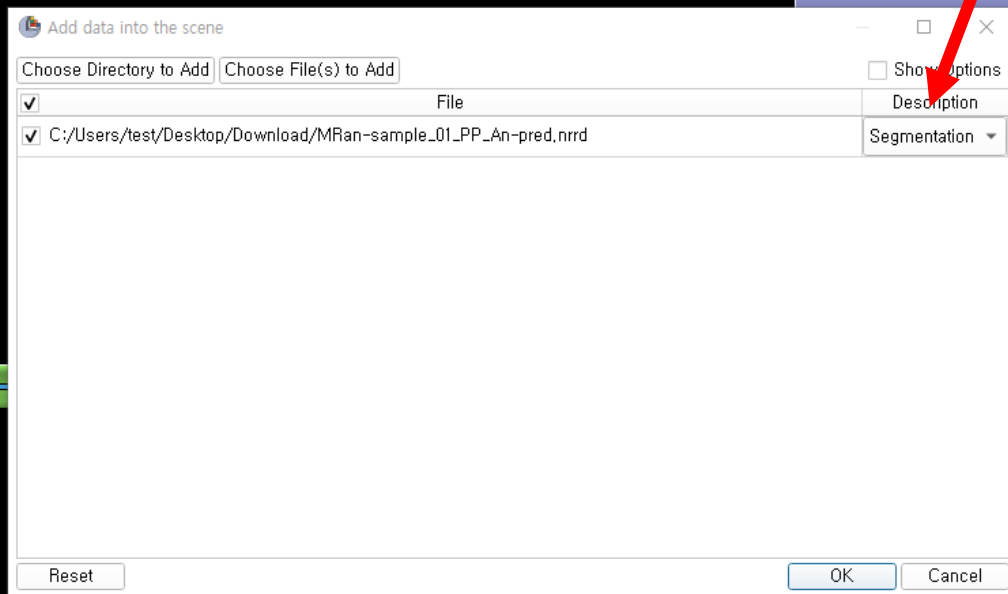

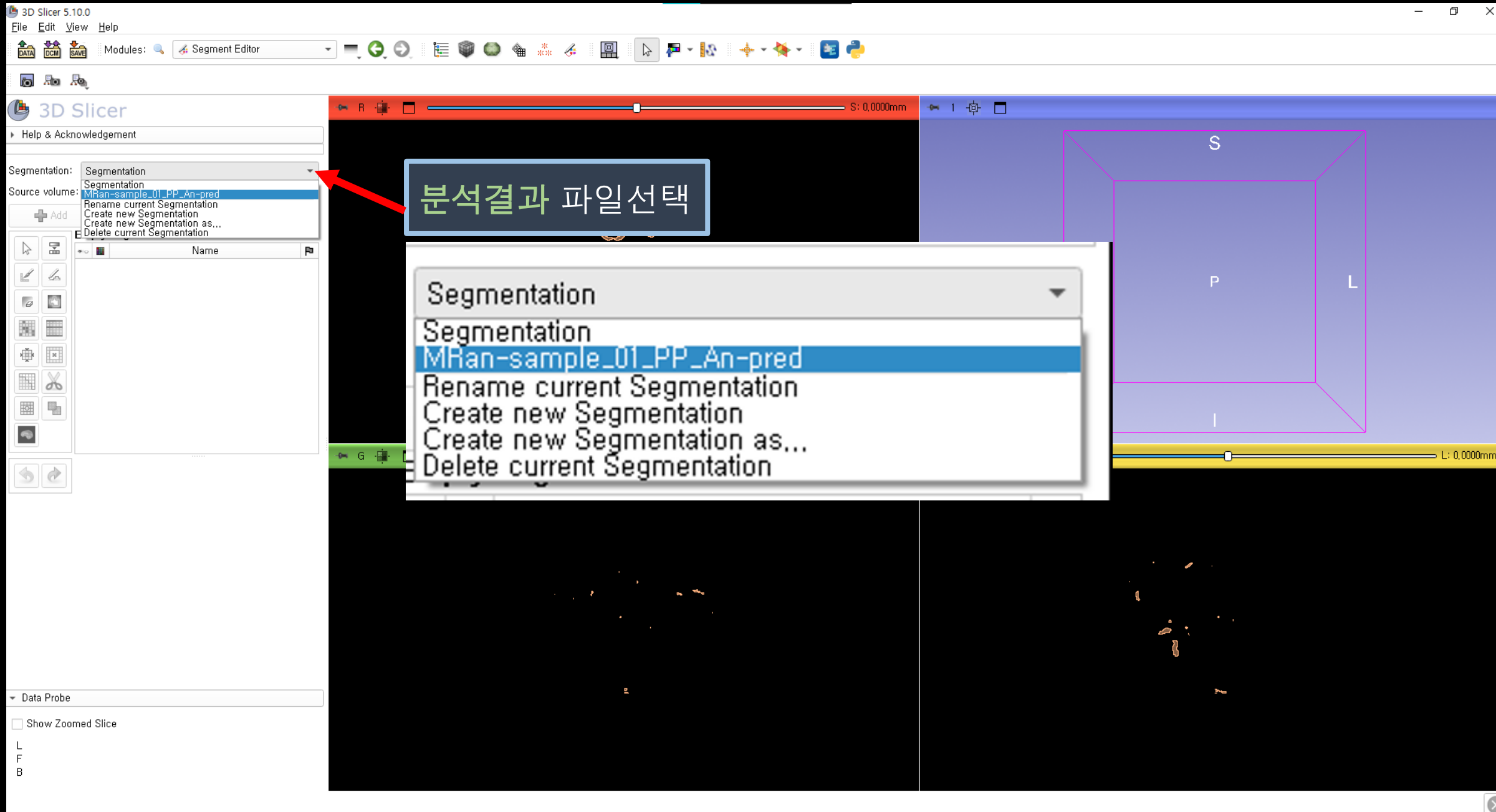


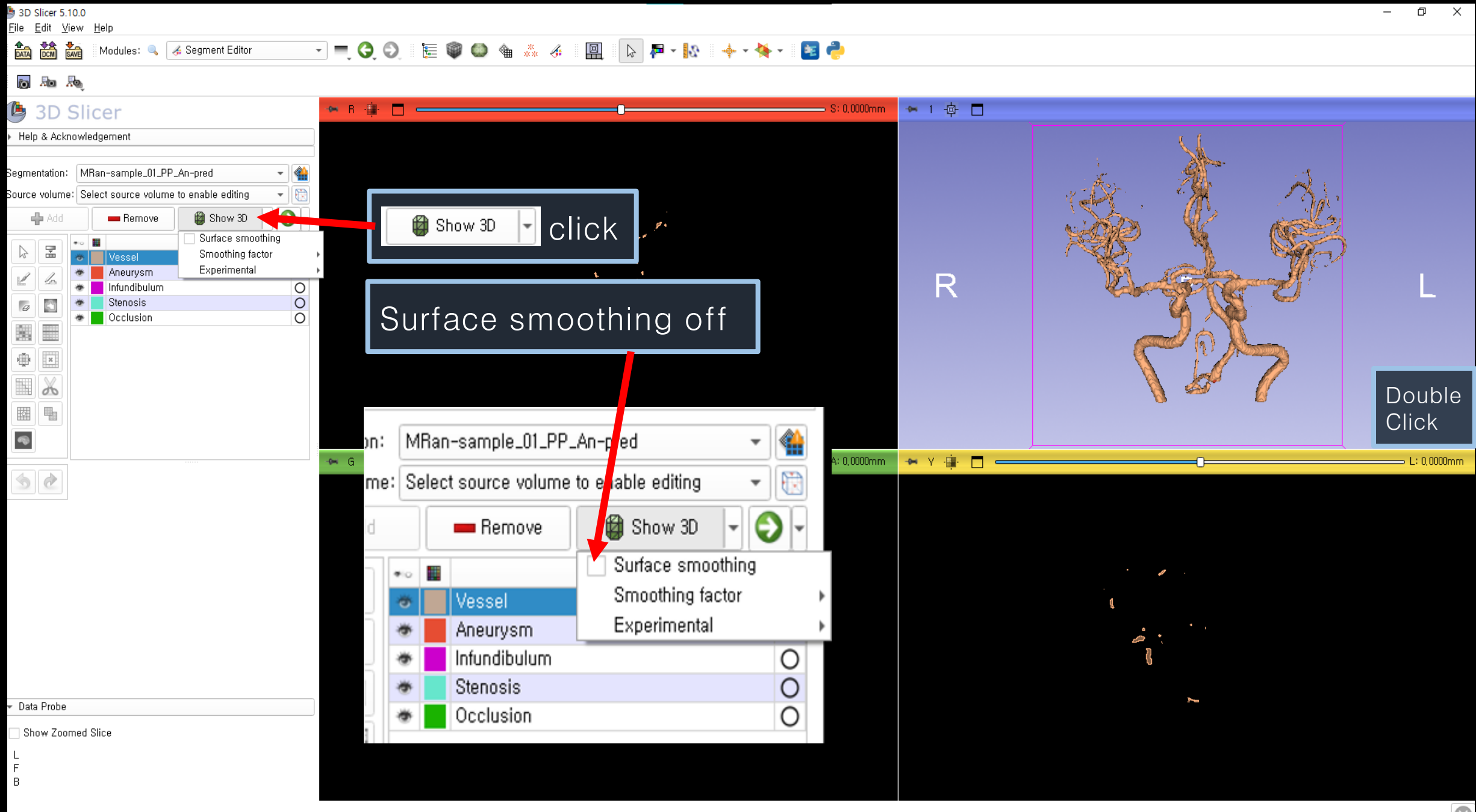


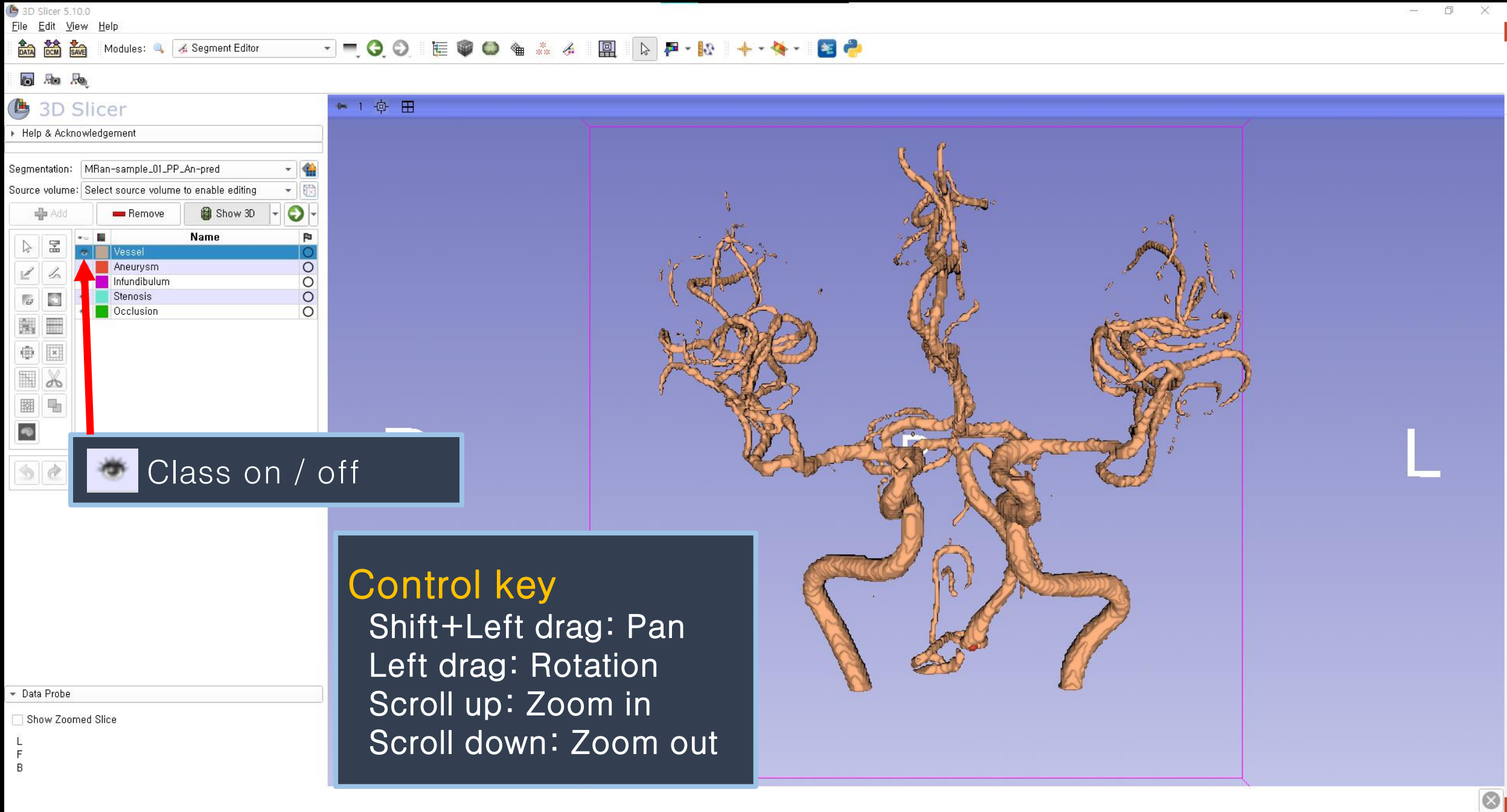

분석된 영상을 확인하는 방법
3D slicer

Infarction
CT hemorrhage

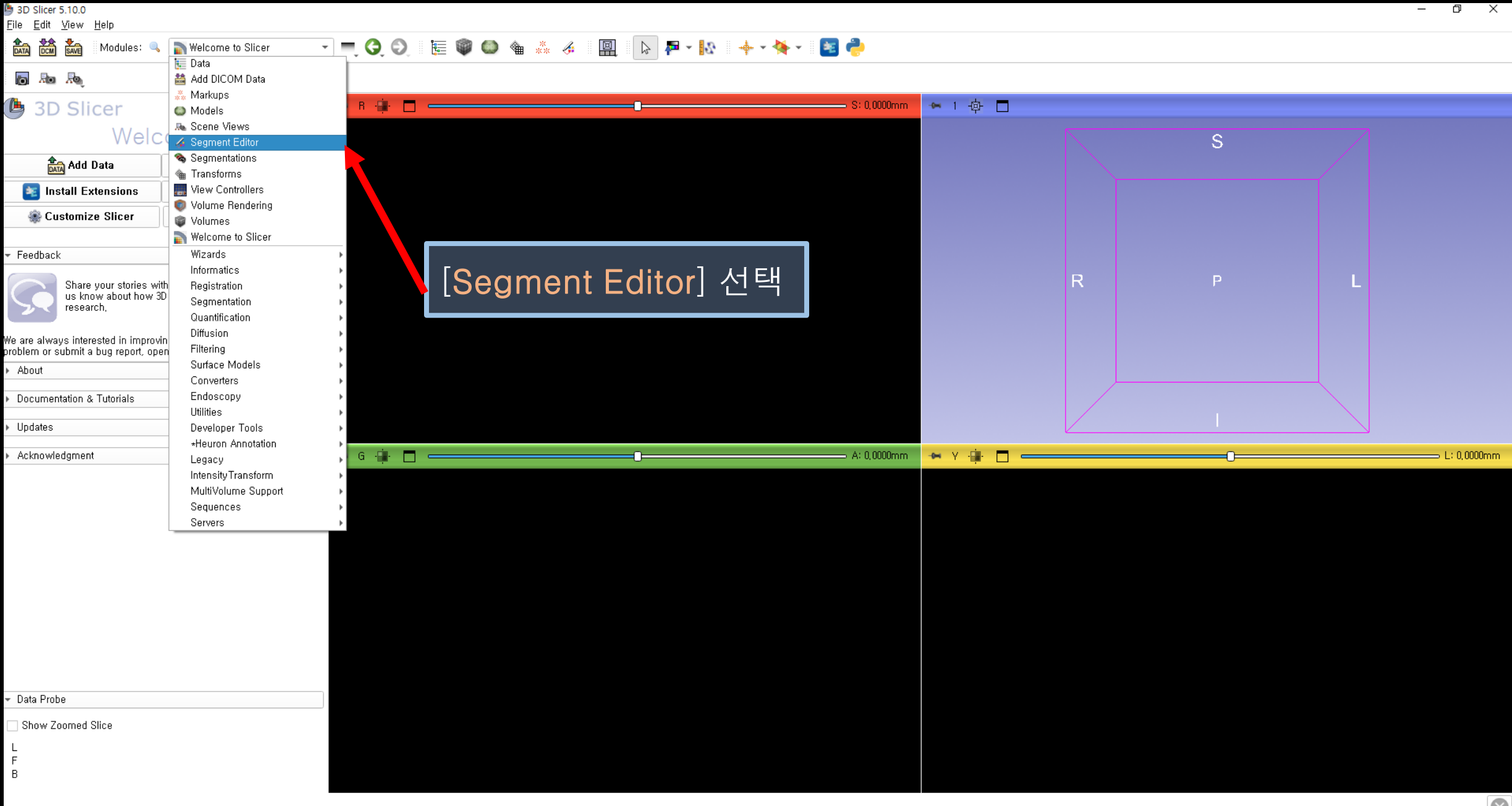

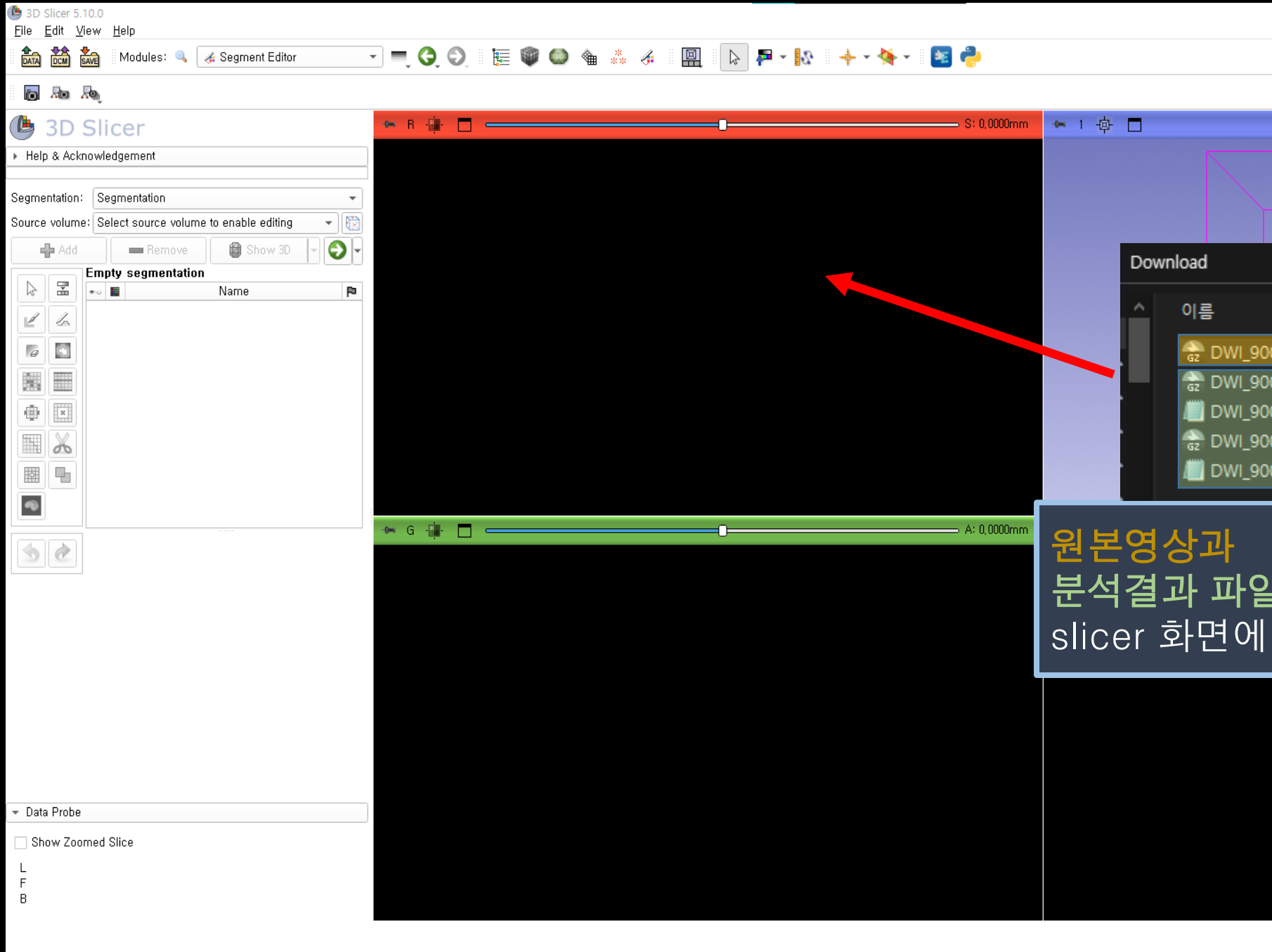

원본영상과
분석결과 파일[-pred] 중 한개를 3D
slicer 화면에 drag & drop 합니다.

3D Slicer 5.10.0

File Edit View Help

Modules: Segment Editor

3D Slicer

Help & Acknowledgement

Segmentation: Select a Segmentation

Source volume: Select source volume to enable editing

+ Add - Remove Show 3D

No node is selected

Name

Reset OK Cancel

Add data into the scene

Choose Directory to Add Choose File(s) to Add Show Options

File	Description
☒ C:/Users/test/Desktop/Download/DWI_9003_PP.nii.gz	Volume
☒ C:/Users/test/Desktop/Download/DWI_9003_PP_M-pred.nrrd	Segmentation

Download

이름	수정된 날짜
DWI_9003_PP.nii	2025-12-27 오전 11:56
DWI_9003_PP_M-pred.nii	2025-12-27 오전 11:56
DWI_9003_PP_M-pred	2025-12-27 오전 11:56
DWI_9003_PP_S-pred.nii	2025-12-27 오전 11:56
DWI_9003_PP_S-pred	2025-12-27 오전 11:56

5개 항목 | 2개 항목 선택함 645KB |

원본영상 → [Volume]
분석결과 파일[-pred] → [Segmentation]으로 설정

