


CLARUS-N



AI for Unlocking Neuroimages

DICOM file 추출하는 방법


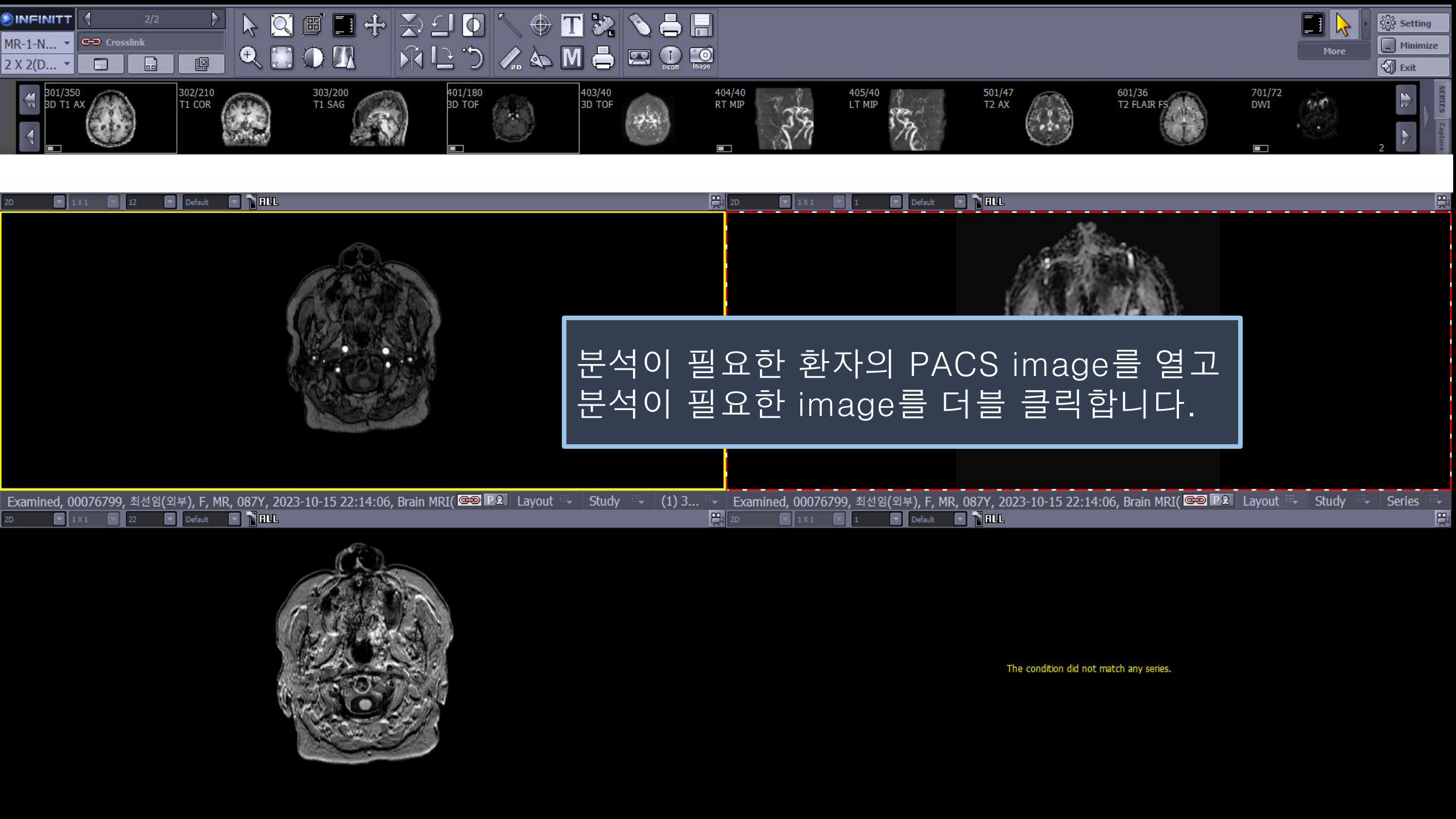


분석이 필요한 환자의 PACS image를 열고
분석이 필요한 image를 더블 클릭합니다.

The condition did not match any series.

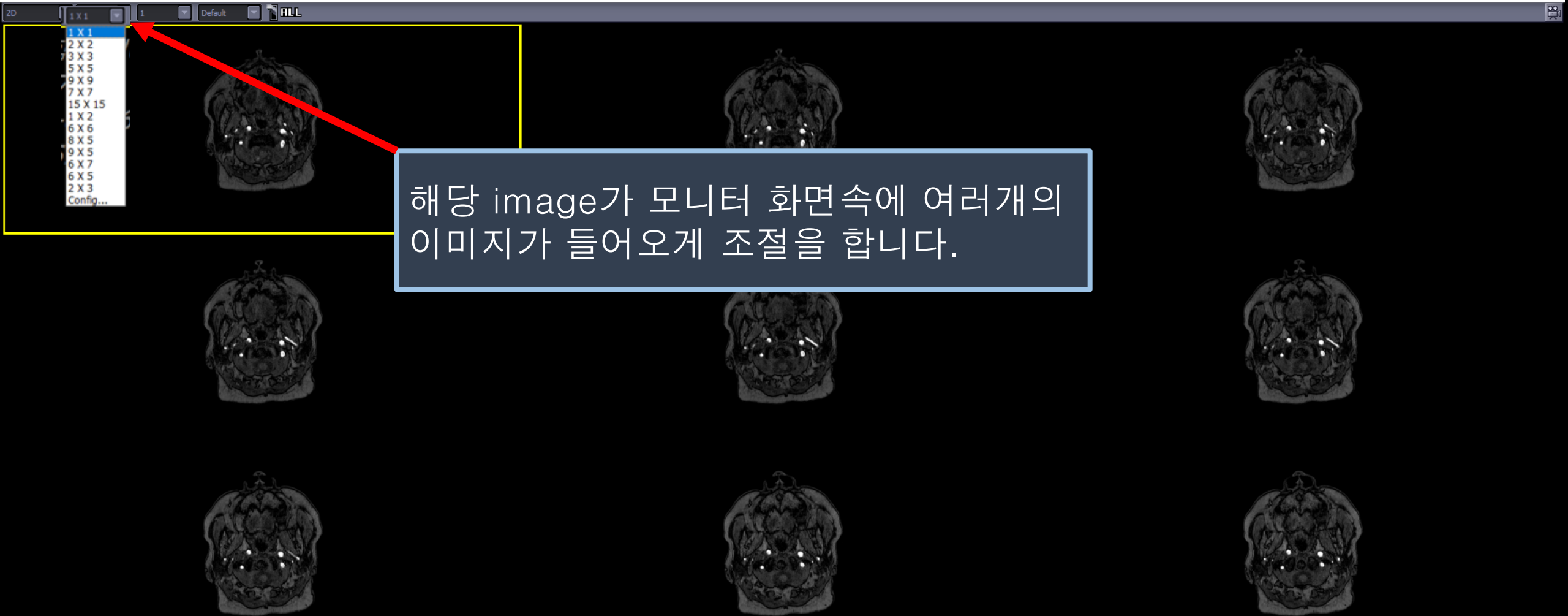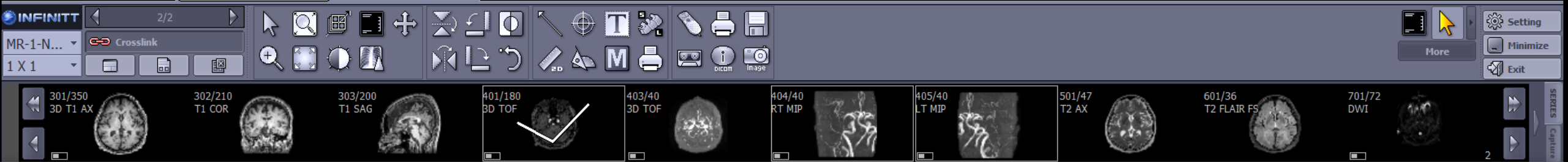


해당 image가 모니터 화면속에 여러개의
이미지가 들어오게 조절을 합니다.

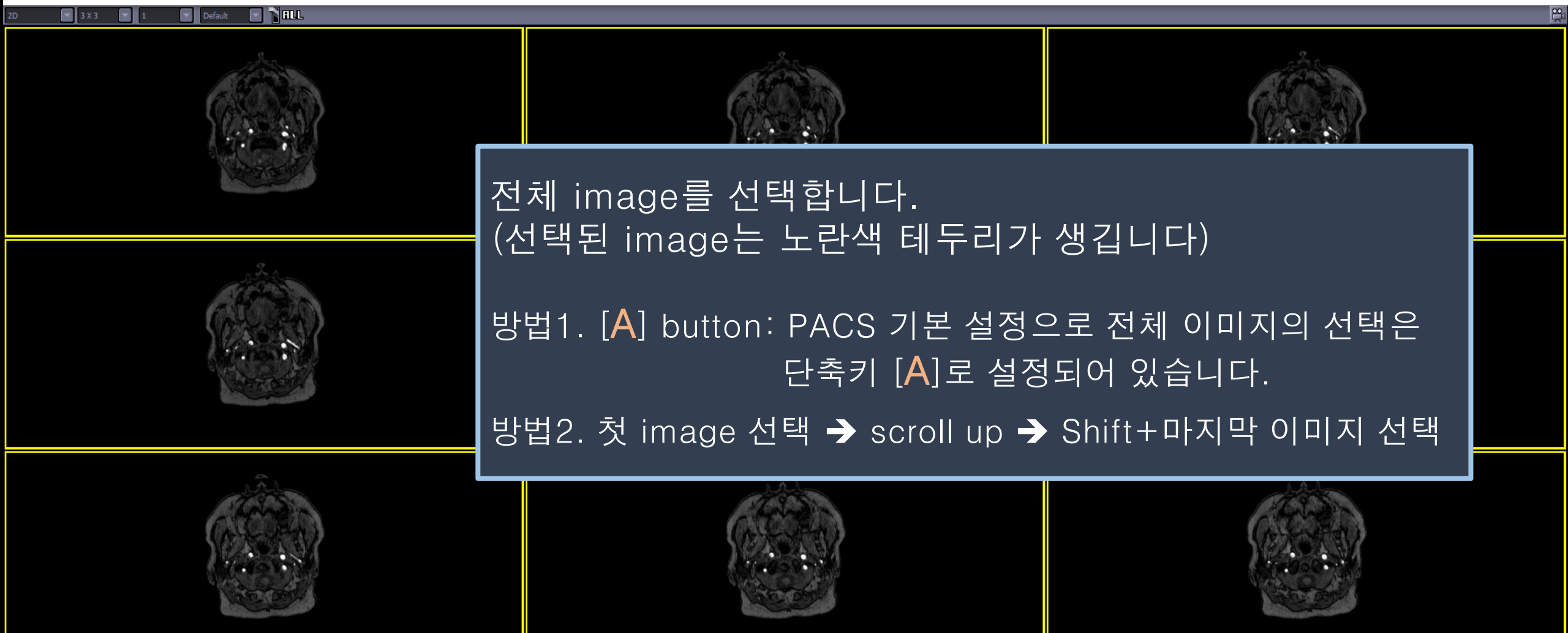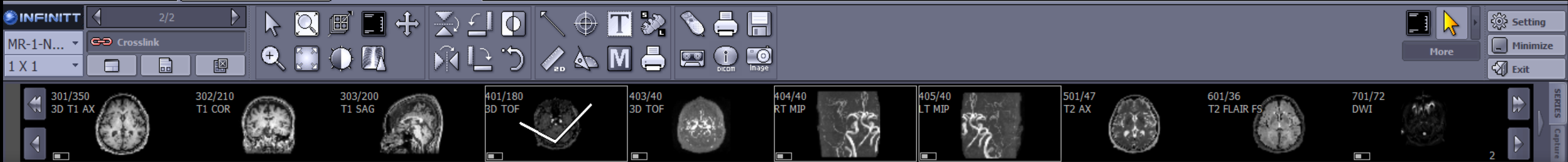

전체 image를 선택합니다.
(선택된 image는 노란색 테두리가 생깁니다)

방법1. [A] button: PACS 기본 설정으로 전체 이미지의 선택은
단축키 [A]로 설정되어 있습니다.

방법2. 첫 image 선택 → scroll up → Shift+마지막 이미지 선택

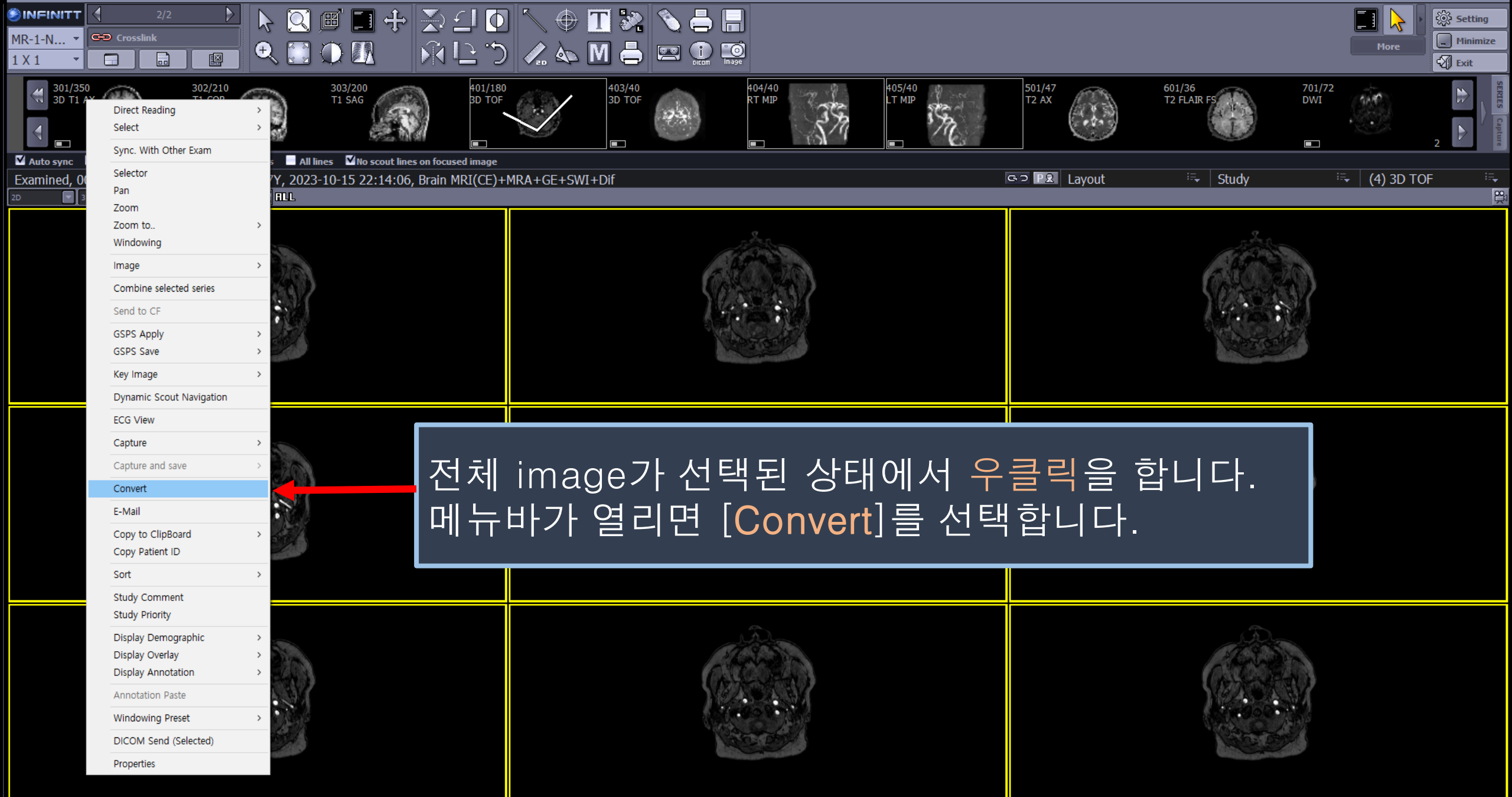



Convert

Search Directory: C:\Users\Wtest\Desktop\WNEW1\Wpre_version

File Name(prefix): A1 ☒ Subfolder (ID, Export date)

Convert type: Original DICOM File (*.dcm)

JPEG Quality: Lossy - Best DPI: 150

AVI Codec: MPEG4 Bitrate: 2000

파일이 저장될 위치를 선택합니다.

저장될 파일명 앞글자를 입력합니다.

익명화 버튼을 클릭합니다.

[Original DICOM File (*.com)]을 선택합니다.

Original DICOM File (*.dcm)

Original DICOM File (*.dcm)

Jpeg File (*.jpg)

Bitmap File (*.bmp)

TIFF File (*.tif)

로그인 사용자의 PACS 권한에 따라 우측과 같은 익명화 창이 추가로 뜰 수 있습니다.

Convert

Search Directory: C:\Users\test\Desktop

File Name(prefix): e ☒ Subfolder (ID, Export date)

Convert type: Original DICOM File (*.dcm) **Edit Info**

JPEG Quality: Lossy - Best DPI: 150

AVI Codec: MPEG4 Bitrate: 2000 kbps

OK Cancel

[Anonymize]
check 후
[Save and OK]

Edit info

☐ Each study

Pat ID	Name	Birth Date	Sex	Accession
153213	TEST	2000/05/12	O	

Patient ID: 11111

Patient Name: TEST

Birth Date: y: 2000 m: 01 d: 1



Sex: O

Access No.:

☒ Anonymize

Save and OK Cancel

처음 지정한 위치에서 추출된 DICOM 파일을 확인할 수 있습니다.

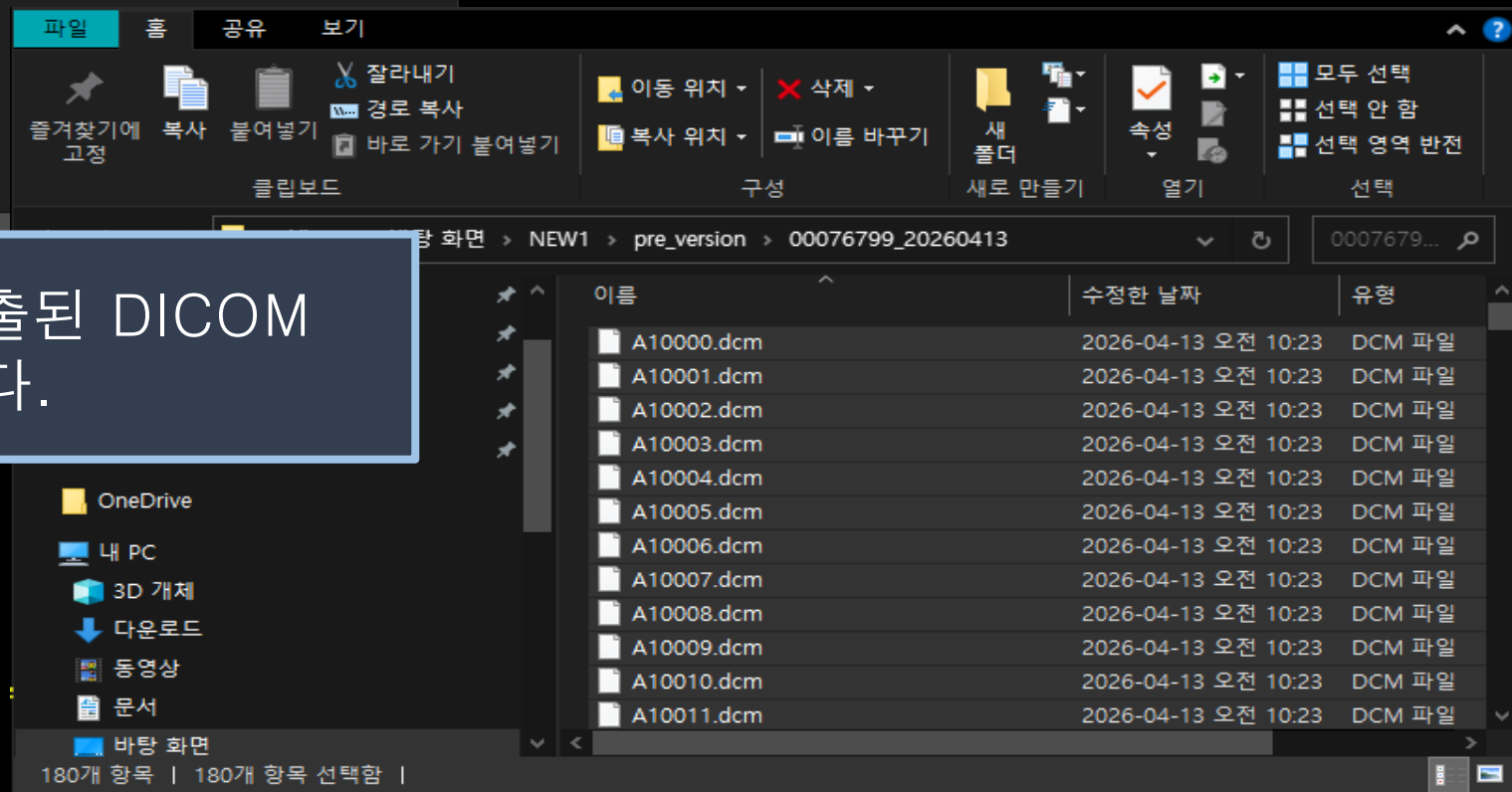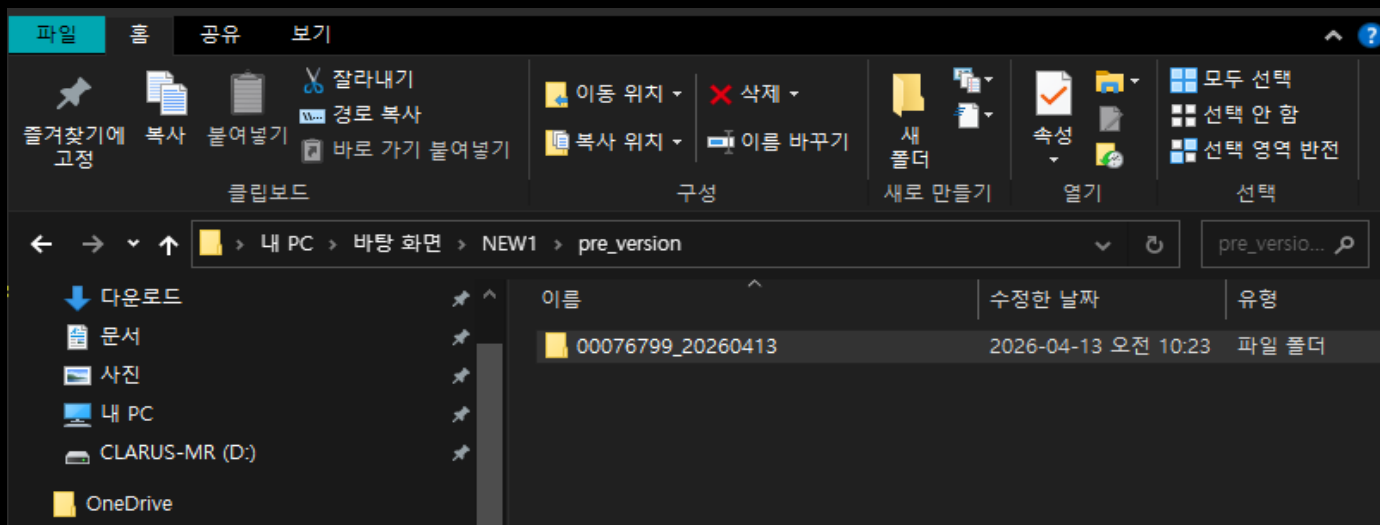

연구용 데이터 AI 분석 의뢰



MRI 또는 CT 데이터를 첨부하세요


클릭하거나 파일을 여기로 끌어다 놓으세요 (최대 25MB)

- 파일 형식 지원 (최대 500MB)
- 전송된 영상은 NIFTI 파일형식으로 모두 전환됩니다
- NIFTI 파일형식의 특성상 모든 환자개인정보가 자동 삭제됩니다
- 원본 파일도 NIFTI 전환 후 모두 삭제됩니다
- 분석된 영상은 이메일로 24시간 이내로 보내드립니다
- 빠른 영상분석이 필요시에는 파일 업로드 후 contact의 연락처로 문의 바랍니다.

이메일 주소 (결과 수신용)

파일 내용 선택

분석 요청하기

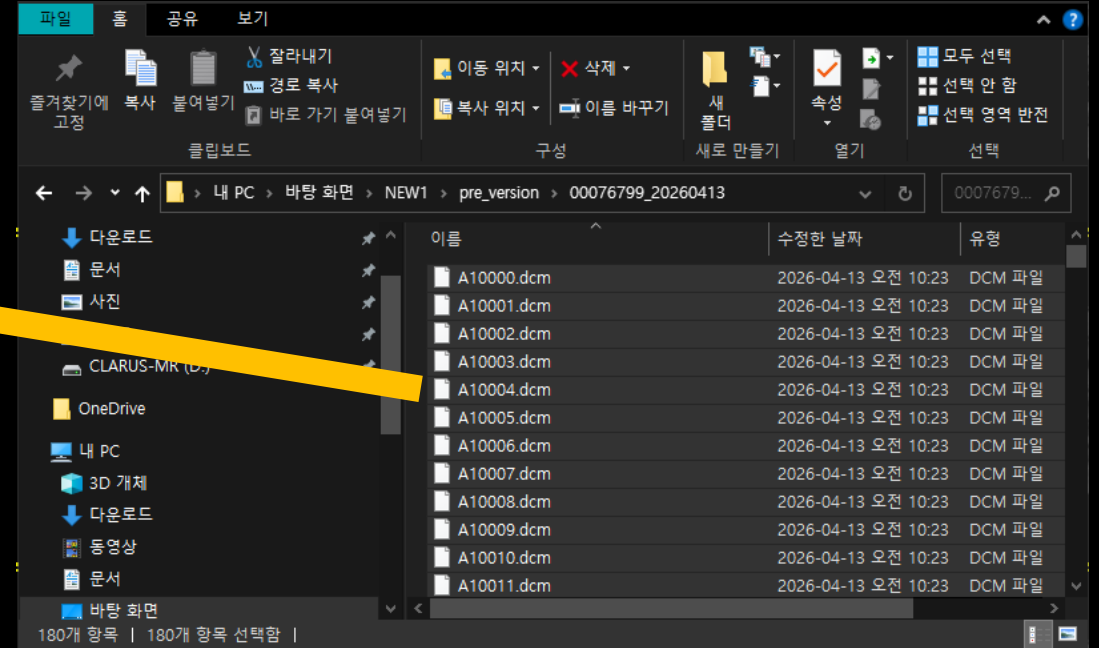

추출된 파일을 압축(.zip)하여 첨부합니다.

분석결과를 수신할 이메일 주소와 파일 내용을 선택한 후 분석요청을 의뢰합니다.